

DatamedFT™

Manuale dell'operatore

Datamed LLC

DatamedFT™ v3

Doc ID DMD-10100-01100-IT Rev A

4/2017

COPYRIGHT

Copyright di © Datamed LLC. Tutti i diritti sono riservati. La riproduzione in tutto o in parte è vietata senza il preventivo consenso scritto del titolare del copyright.

GARANZIA

Datamed LLC ("DLLC") non fornisce alcuna garanzia di alcun tipo relativamente a questo materiale, incluse, ma senza limitazioni, le garanzie implicite o la commerciabilità e idoneità per un particolare scopo. Il software descritto nel presente documento è disciplinato dalle normative standard EULA di DLLC, disponibili sul sito di DLLC (www.datamed.com).

PRECAUZIONI

Questo prodotto non è destinato all'uso domestico.


MARCHI

I seguenti marchi sono marchi registrati dei rispettivi proprietari.

| <i>Proprietario</i> | <i>Marchio(i)</i> |
|--------------------------|-----------------------------------------------|
| Datamed LLC | <i>Datamed</i> |
| Digi International, Inc. | <i>AnywhereUSB</i> |
| Microsoft Corporation | <i>Microsoft and Microsoft Windows Server</i> |
| VMWare, Inc. | <i>VMWare and vMotion</i> |

NORMATIVA

Questo prodotto è conforme ai requisiti regolatori della Direttiva Europea 93/42/EEC.

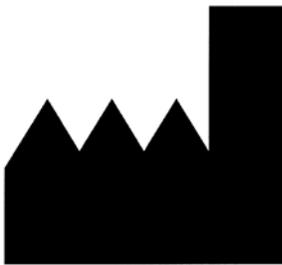

Prodotto e distribuito da:

Datamed LLC
9620 Mitchell Place
Brentwood, TN 37027
USA
US: +1 800 601-3361
Int'l: +1 901 672 6225
Fax: +1 901 672 6331
www.datamed.com

Uso previsto

Il presente prodotto è un'applicazione software ideata per convertire dati ECG dal formato di un produttore al formato di un altro. È destinato all'utilizzo nel flusso di dati tra un dispositivo che acquisisce e analizza un ECG a riposo e un sistema di memorizzazione/gestione che salva gli ECG per la loro visualizzazione, modifica e stampa. Il presente prodotto non esegue alcun tipo di analisi, misurazione o filtraggio. Non è destinato ad essere utilizzato per scopi diversi dalla conversione dei dati nel file dal formato di origine a quello di destinazione.

Requisiti di sistema

- **PC.** Se il software non è installato nel server del sistema di gestione ECG, verrà installato in un altro computer adiacente. Le specifiche minime del computer sono: 2 GB di RAM, HD da 40 GB, 1 porta USB per la chiave di licenza (a meno che non si utilizzi un adattatore USB-to-LAN) e una connessione LAN per la trasmissione dei file. Sono supportati i seguenti sistemi operativi: Windows Server 2008 x86 e x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 e Windows Server 2016. La presente applicazione richiede Microsoft .NET 4.5 Framework.
- **Considerazioni su VM.** Il presente software può essere eseguito su una macchina virtuale, ma l'accesso alla chiave di licenza USB deve essere pianificato. Per installazioni a server singolo, la chiave può essere inserita nel computer host e assegnata a VM. Per configurazioni FT (fault-tolerant) inclusa vMotion®, si può utilizzare un adattatore USB-to-LAN, ad esempio AnywhereUSB.

Installazione

- Installare la chiave di licenza fornita nel computer. La chiave deve essere inserita fisicamente in una porta USB del computer (o nell'adattatore USB-to-LAN). I driver possono essere scaricati al seguente indirizzo: <http://sentinelcustomer.safenet-inc.com/sentineldownloads/>.
- Eseguire il programma di installazione in dotazione e seguire le istruzioni passo-passo.
- Dopo l'installazione, eseguire l'utilità di configurazione per configurare l'applicazione. Un collegamento all'utilità è disponibile sul desktop e nel menu Start.
- Dopo la configurazione, è possibile avviare l'applicazione dall'utilità di configurazione o essa sarà avviata automaticamente dopo un riavvio del sistema.

- **NOTA IMPORTANTE:** se la cartella "In uscita" è condivisa in una rete, l'account del servizio dell'applicazione deve essere modificato dall'account di sistema locale in un account che abbia accesso alla rete della cartella condivisa. Senza questa modifica il servizio non è in grado di scrivere su file.

Configurazione

Avviare l'utilità di configurazione e modificare le impostazioni di configurazione in base alle esigenze. Gli elementi di configurazione principali sono il formato di input, il formato di output, l'archiviazione e la registrazione. Una volta che tutte le impostazioni sono corrette, salvare le impostazioni premendo il pulsante **Save (Salva)**. Successivamente, avviare il servizio premendo il pulsante **Start (Avvia)** o utilizzando la normale applet dei servizi Windows.

Dettagli specifici sulle impostazioni di configurazione sono reperibili nel manuale di assistenza dell'applicazione, che è disponibile sul nostro sito (www.datamed.com). Il manuale di assistenza è disponibile solo in inglese.

Funzionamento

La presente applicazione viene eseguita come un servizio automatico di Windows e per il funzionamento non sono richieste né alcuna interfaccia né alcuna interazione.

Aggiornamento della chiave di licenza

Se vengono acquistate ulteriori licenze, seguire i passaggi riportati di seguito per aggiornare la chiave di licenza:

1. Avviare l'utilità di configurazione e selezionare *License → Create License Update Request File (Licenza → Crea file di richiesta aggiornamento licenza)* nel menu. Selezionare un nome del file e una cartella in cui scrivere il file.
2. Verrà creato un file nella posizione specificata con estensione ".c2v". Inviare questo file via e-mail a DLLC all'indirizzo support@datamed.com.
3. DLLC creerà un file di aggiornamento (con estensione ".v2c") e lo rispedirà via e-mail. Salvare il file.
4. Nell'utilità di configurazione selezionare *License → Load License Update (Licenza → Carica aggiornamento licenza)* nel menu. Navigare fino al file di aggiornamento salvato e premere *Open (Apri)* per caricare la licenza.
5. Una volta che l'aggiornamento è completato, verrà visualizzato un messaggio che ne indica la riuscita. I file di aggiornamento possono ora essere eliminati.

Arrestare e riavviare il servizio per consentire alla nuova licenza di essere riconosciuta.

Supporto tecnico

Il supporto DLLC è raggiungibile via e-mail all'indirizzo support@datamed.com o telefonicamente ai numeri (800) 601-3361 Ext 2 (per chi chiama dagli Stati Uniti) o +1 901 672 6225 Ext 2 (per chi chiama da fuori gli Stati Uniti).